

Mito Analyzer 0.7.0 — 알고리즘 단계별 설명

세포 하나하나의 미토콘드리아 형태(MiNA)와 관심 단백질(green)이 미토콘드리아 위에 얼마나 있는지를 측정하고, 둘의 관계를 회귀분석으로 보는 프로그램입니다.

입력: 같은 시야의 3채널 이미지

- Red = 미토콘드리아 (MitoTracker 등)
- Green = 관심 단백질 (POI)
- Blue = 핵 (DAPI/Hoechst)

처리 순서


0. 밝기 자동 보정 (이미지마다 gain·노출이 달라도 같은 기준)
1. 세포 ROI: 핵 하나 = 세포 하나, 미토콘드리아가 끊어지는 선을 경계로 사용
2. green+ / green- 세포 분류 (ROI 모양은 바꾸지 않음)
3. 세포마다 미토콘드리아 분할 + MiNA 형태 분석
4. 미토콘드리아 위의 green 신호, green puncta
5. 표·이미지 출력, 상관/회귀분석, 여러 샘플 통합 분석

예시 이미지: Processed_New01_Ch1_Red.tif 외 2채널


1024×1024 px, 픽셀 0.0990 μm

모든 크기 상수는 μm 기준이라 배율이 달라도 같은 크기로 동작합니다.


Red: 미토콘드리아

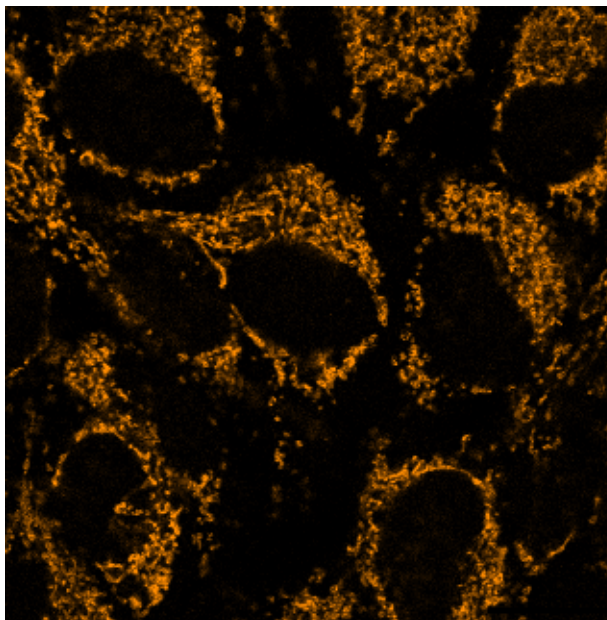


Green: 관심 단백질

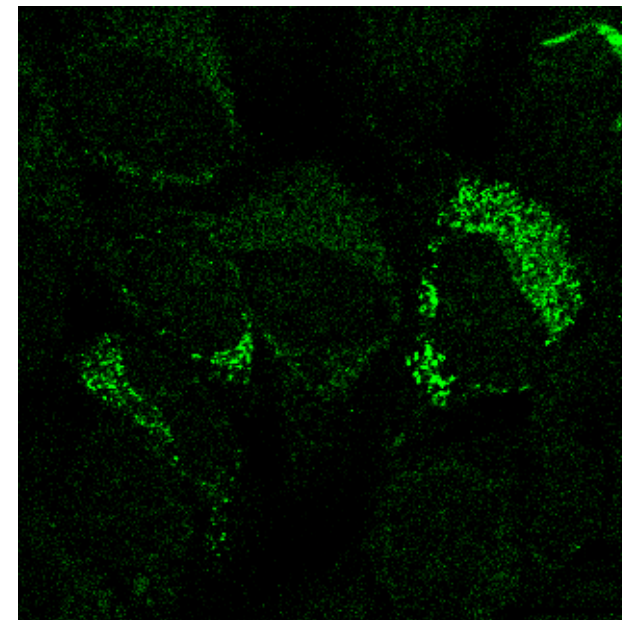

Blue: 핵

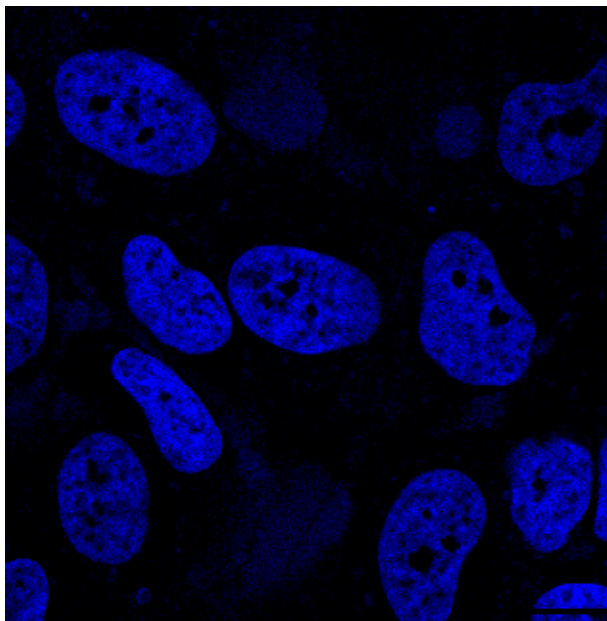

Merge

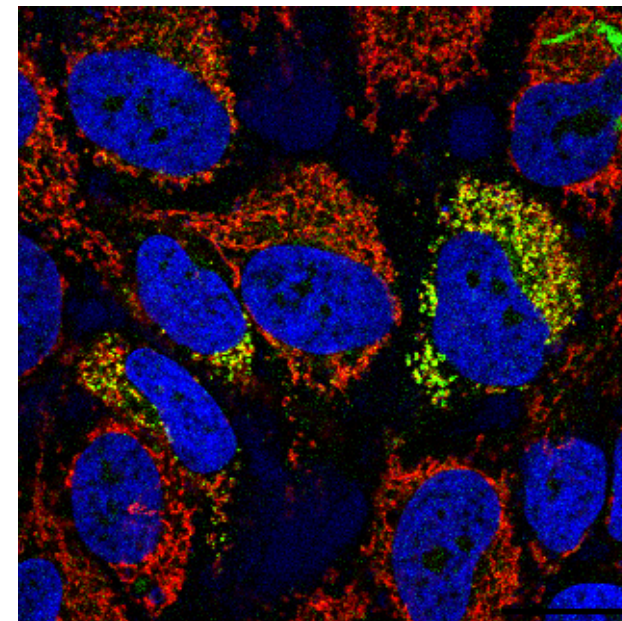

0단계 — 밝기 자동 보정 (auto-levels)

green 이미지를 $\sigma = 4$ px(기준 픽셀)로 부드럽게 한 뒤

- 하위 1 % 값 = 세포 사이 어두운 틈 = 배경(offset)
- 75 % 값 - 배경 = 세포질 기준 밝기(unit)


로 보고, 기준 세트와 같은 단위가 되도록 선형 변환합니다.

이 이미지: 배경 0.08, gain $\times 1.00$


이 덕분에 노출·gain·bit depth가 다른 이미지에서도 같은
임계값과 상수가 그대로 쓰입니다. 크기 상수는 픽셀 크기
비율 $k = 0.099 \mu\text{m} / \text{픽셀}$ 크기로 함께 조정됩니다.

green의 약한 자가형광은 세포 경계의 보조 정보로도 쓰입니다
(1단계의 비용 지도).


원본 green (표시용 자동 대비)

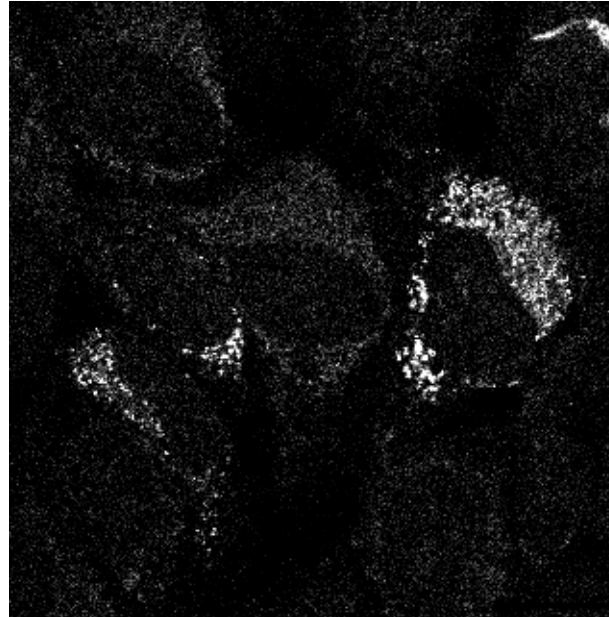

보정된 green

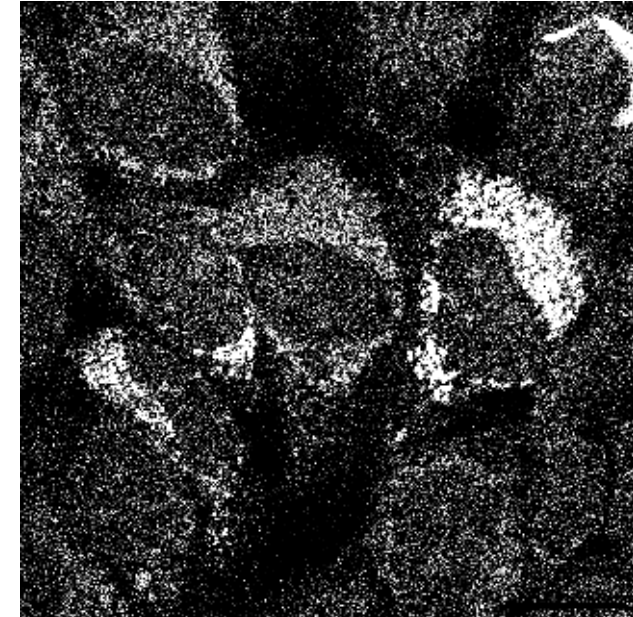

밝기 분포와 기준점

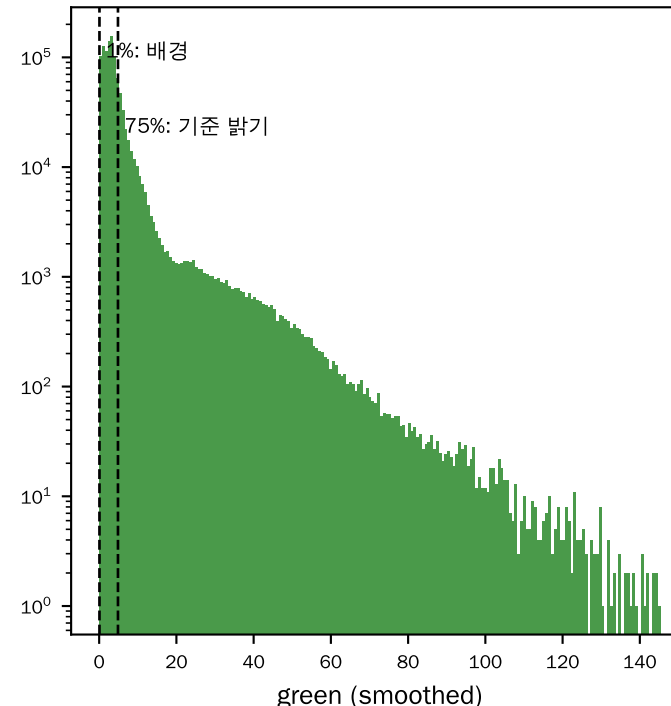

1-1단계 — 핵 찾기 (세포의 씨앗)

세포 하나에는 핵이 하나 있고, 세포질은 핵을 둘러싸고 있다는 형태를 그대로 이용합니다. 핵이 각 세포 ROI의 씨앗(seed)입니다.

초점이 맞은 핵 (노란 윤곽)


- blue를 $\sigma = 2$ px로 부드럽게 → Otsu 임계값
- 열림 연산(3 px)으로 잡음 제거, 구멍 채움, 약 $30 \mu\text{m}^2$ 보다 작은 조각 제거

흐린(초점 밖) 핵 (분홍 윤곽)

- 부드럽게 한 blue가 Otsu 값의 40 % 이상
- 초점 맞은 핵과 떨어져 있고, 충분히 크고(최소 핵 면적의 40 %), 둥글고 짙(solidity ≥ 0.8) 덩어리
- 이 세포도 자기 ROI를 가져서, 그 미토콘드리아가 옆 세포로 넘어가지 않습니다. 표의 seed 열 = "dim nucleus"

이 이미지: 초점 맞은 핵 13개, 흐린 핵 4개

blue + 핵 윤곽 (노랑: 초점, 분홍: 흐린 핵)

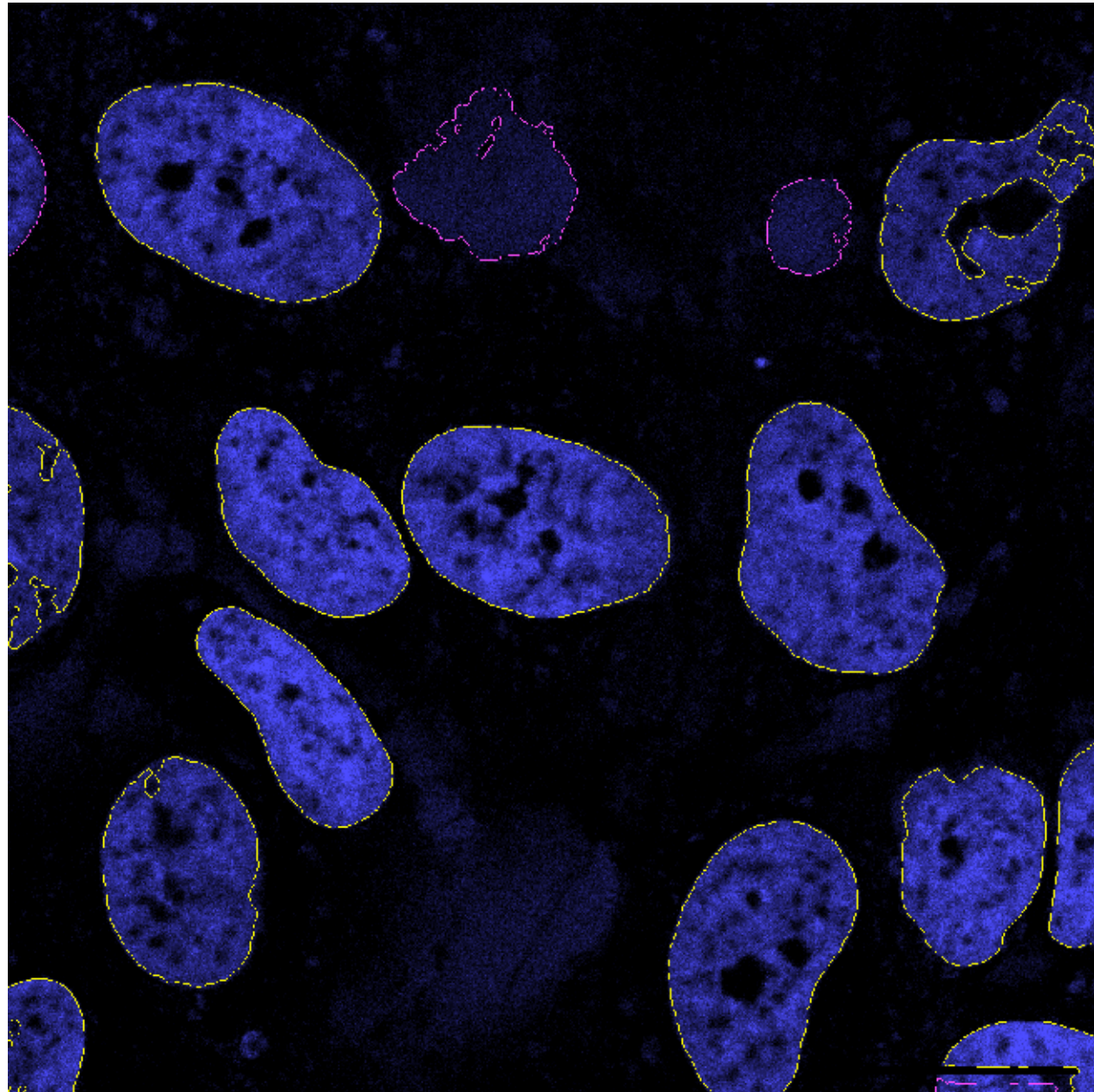

1-2단계 — 미토콘드리아 밀도와 "끊어지는 선"


세포와 세포 사이에는 미토콘드리아가 없는 가는 선이 있습니다.
red 이미지에서 이 선을 찾아 경계로 씁니다.

A. 미토콘드리아 밀도: red를 $\sigma = 1.5 \mu\text{m}$ 로 부드럽게 →
상위 1 % 값으로 나눔 (0-1). 미토콘드리아가 뻗뻗한 곳일수록 밝음.


B. 끊어지는 선: 밀도 지도에 Sato 필터(어두운 능선, 폭 1.5-2.5 μm)
→ 주변보다 가늘고 어두운 선(= 세포 사이 틈)이 밝게 나옴.

C. 전경(세포가 있는 곳): red를 $\sigma = 3 \mu\text{m}$ 로 부드럽게 한 값이
상위 1 % 값의 12 % 이상인 곳 + 핵. 작은 틈은 닫고(2 μm),
200 μm^2 이하 구멍은 채웁니다. 배경은 어떤 세포에도 안 들어감.

A. 미토콘드리아 밀도

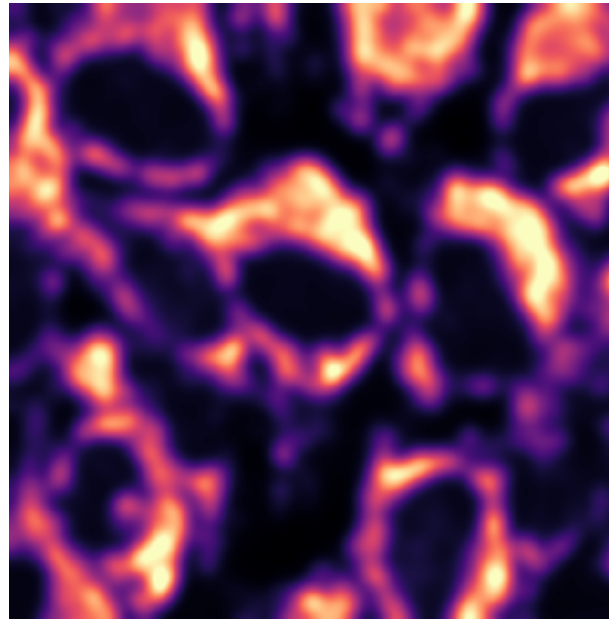


B. 끊어지는 선 (Sato, 어두운 능선)

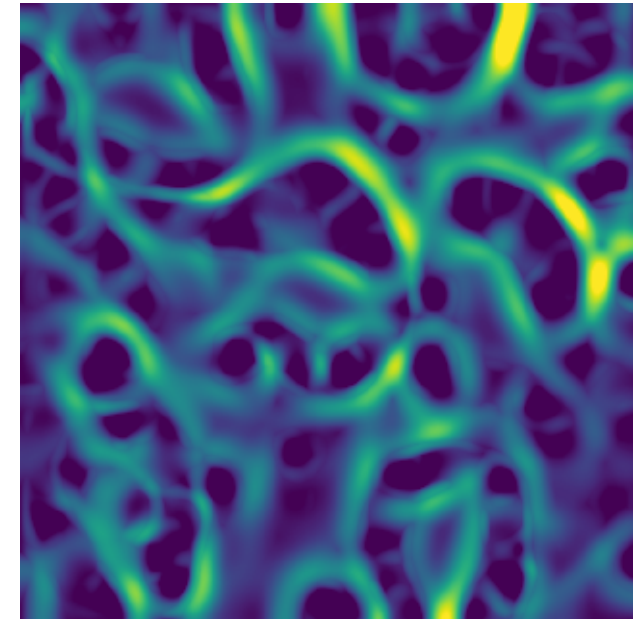

C. 전경 (흰색) + 핵



red 원본

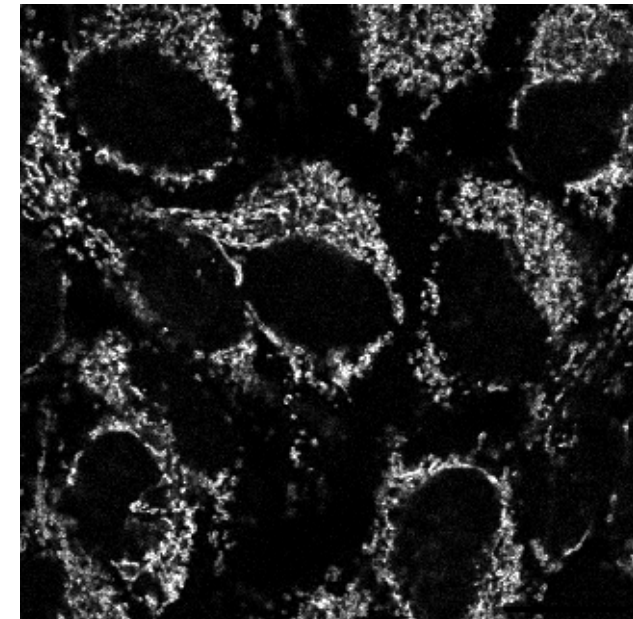

1-3단계 — 세포 ROI: 핵에서 고르게 퍼지는 watershed

비용 지도 = (1 - 미토콘드리아 밀도) + 끊어지는 선 + green 경계 지도


- 미토콘드리아가 뺏뺏한 곳은 비용이 낮아 쉽게 넘어가고,
- 끊어지는 선 위는 비용이 높아 경계가 그 선에 놓입니다.
- green 경계 지도: 보정된 green의 어두운 골짜기(Sato, 큰 폭)와 green 밀도가 낮은 곳.

모든 핵(초점 + 흐린 핵)에서 동시에 watershed를 시작하고,
compactness(0.003)를 주어 핵에서 멀어질수록 비용이 조금씩
늘게 합니다 → 각 세포가 핵을 중심으로 고르게(마름모꼴에 가깝게)
자라고, 한 세포가 길게 뻗어 이웃을 삼키지 않습니다.


마지막으로 ROI를 매끄럽게 다듬고(열린 연산, 핵은 유지),
이미지 가장자리에 닿는 세포는 "edge"로 분석에서 뺍니다
(옵션으로 포함 가능). * = 흐린 핵에서 자란 세포.

이 이미지: 세포 ROI 17개, 분석 대상 5개

비용 지도 (밝을수록 넘기 어려움)

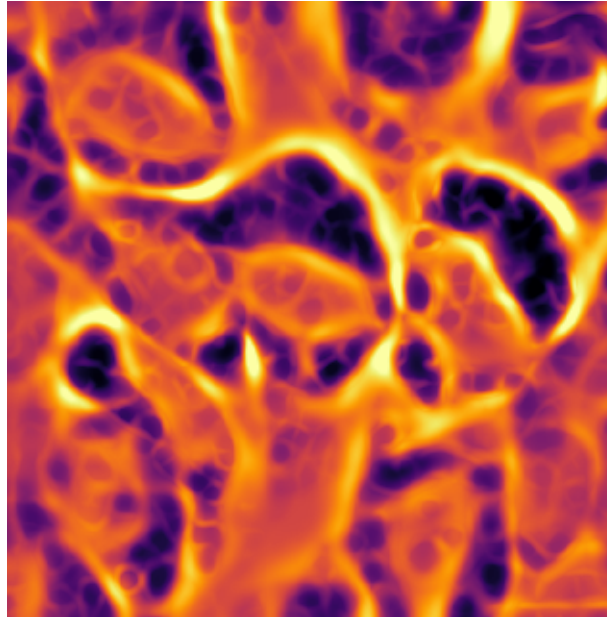

최종 세포 ROI (청록), 번호

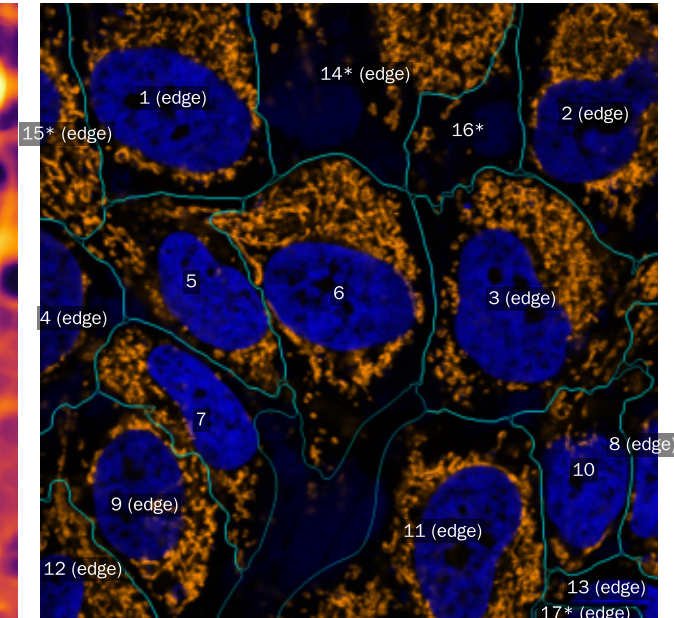

2단계 — green+ / green- 세포 분류

관심 단백질은 보통 세포 단위로 켜지거나 꺼집니다.

밝은 green 마스크 (노랑)

- 보정된 green을 $\sigma = 1.5$ px로 부드럽게 $\rightarrow \log$
- Otsu 두 번: (세포질 vs 신호) $\rightarrow$ (약한 신호 vs 강한 신호)
- 단, 세포질 기준 밝기의 3배 미만은 절대 밝다고 보지 않음
 $\rightarrow$ green을 발현하는 세포가 없는 이미지에서는 마스크가 거의 없음


세포 점수 = 세포질(세포 - 핵) 중 밝은 green이 덮는 비율

- 점수 $\geq 2\%$ (옵션) $\rightarrow$ green+ (빨간 윤곽), 아니면 green- (회색)

중요: 이 단계는 ROI 모양을 바꾸지 않습니다. 분류만 하고,
green+와 green- 세포는 이후 모든 측정·상관분석을 각각 따로
계산해서 _green_pos / _green_neg 파일로 출력합니다.

이 이미지: 밝은 green 기준 ≥ 22.6 (보정 단위)

밝은 green (노랑), 세포 번호 + 점수

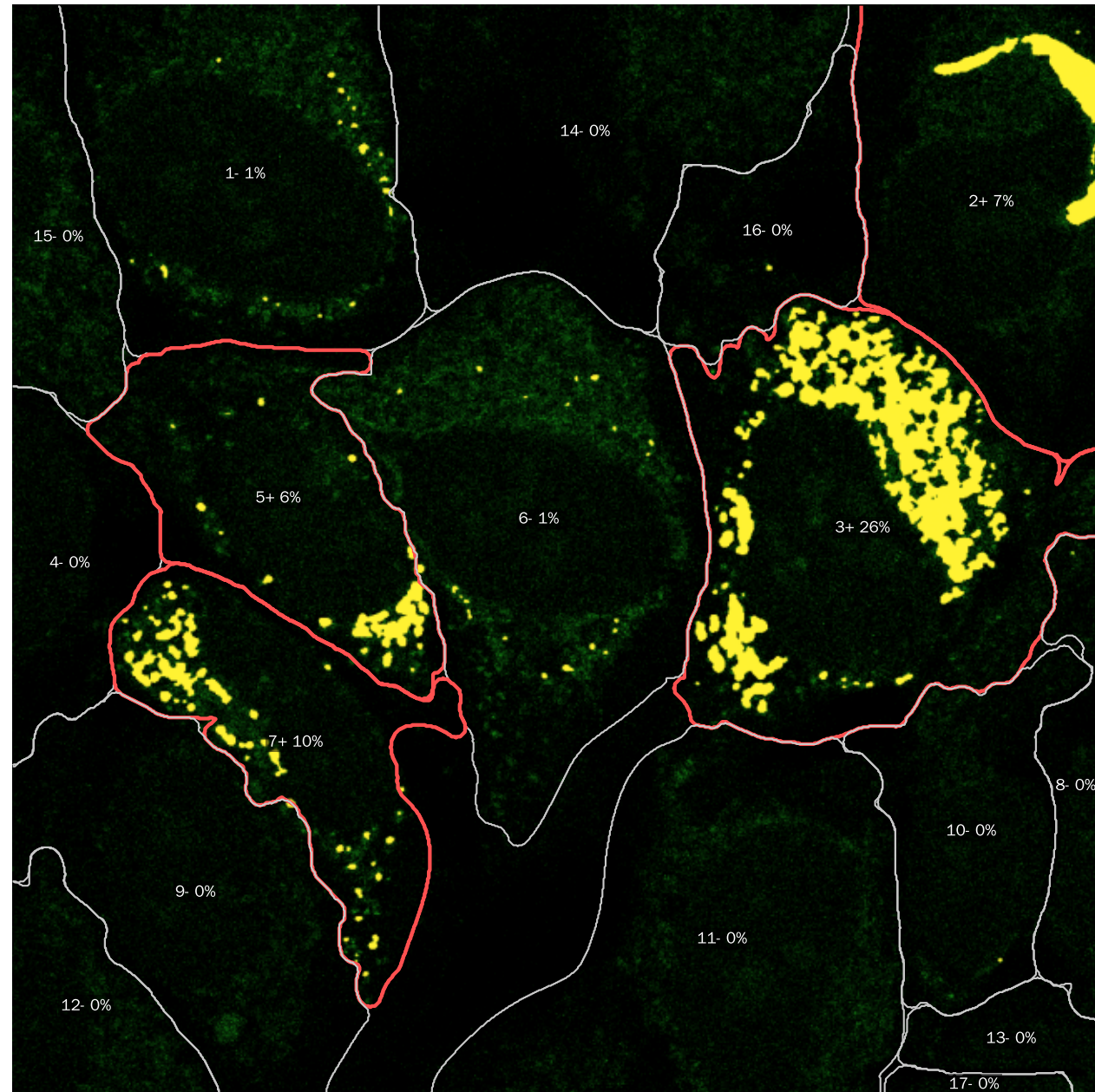

3단계 — 미토콘드리아 분할과 MiNA (예: cell06)


분석 대상 세포마다 red 채널에서 미토콘드리아를 나눕니다.
(기본 "Split objects", 옵션으로 MiNA classic = 세포별 Otsu 하나)

1. 배경 제거: rolling ball (반지름 1.5 μm) $\rightarrow$ Gaussian
2. 전경: 국소 평균(1.1 μm 창)보다 밝고, 세포 Otsu의 50 % 이상.
아주 작은 구멍은 채움(가짜 고리 방지), 점 같은 잡음 제거
3. 과분할: 밝은 봉우리마다 씨앗(h-maxima) $\rightarrow$ watershed
4. 보수적 재합침: 두 조각이 떨어져 있으려면 점점이 어둡고
(봉우리의 75 % 미만) 동시에 목처럼 좁아야 함
5. 맞닿은 조각 사이에 1 px 틈 $\rightarrow$ MiNA가 따로 셉니다


MiNA: 골격화(skeleton) $\rightarrow$ 가지(branch), 연결점, 끝점, 네트워크,
가지 길이, 도넛(고리) 수, footprint(면적) 등. 조각화 지표:
100 μm^2 당 조각 수, 면적가중 평균 크기, form factor 등.

cell06: footprint 206.7 μm^2 , 네트워크 164, 가지 354

red (세포 안)

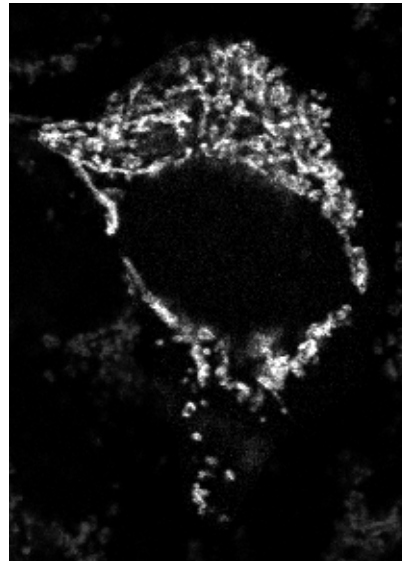

배경 제거 후

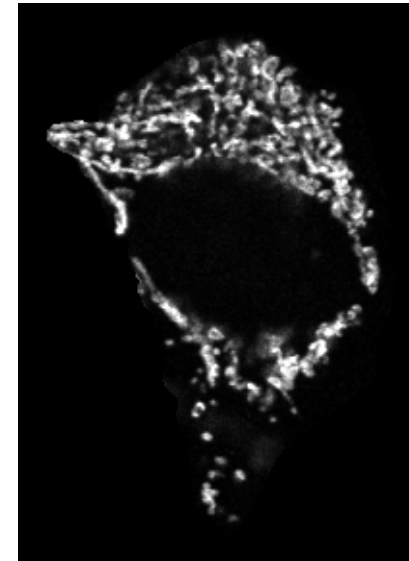


전경 마스크



분할된 미토콘드리아 (색 = 조각)



MiNA 골격 (초록) / footprint (보라)

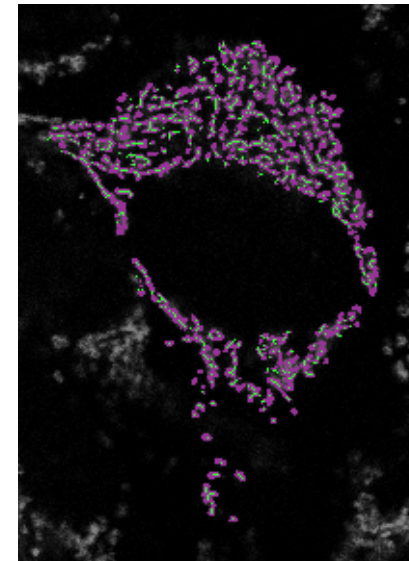

4단계 — 미토콘드리아 위의 green (예: cell06)

green에서 배경(0단계 offset)을 뺀 값으로 측정합니다.

세포 단위

- 미토콘드리아 위 / 밖 green 평균, 농축비(on/off), 전체 green 중 미토콘드리아 위 비율, 적분값
- red-green Pearson, Manders 계수

green puncta (점상 신호)


- green을 $\sigma = 1$ px로 부드럽게 → white top-hat (반지름 8 px)으로 퍼진 세포질 신호 제거
- 이미지당 임계값 하나 = $\max(\text{Otsu}, \text{중앙값} + 6 \text{ MAD}) \times \text{민감도}$
→ 한 이미지 안의 어두운/밝은 세포를 같은 기준으로 비교
- 노랑 = 미토콘드리아 위 puncta, 청록 = 밖

미토콘드리아 조각 단위


- 조각마다 길이, 가지 수, 종횡비, 면적, solidity, form factor
- 그 위의 green 평균/적분/최대, 겹치는 puncta 수와 면적

이 이미지: puncta 임계값 29.0 (top-hat 단위)


green (초록) + red, 미토콘드리아 윤곽 (분홍)

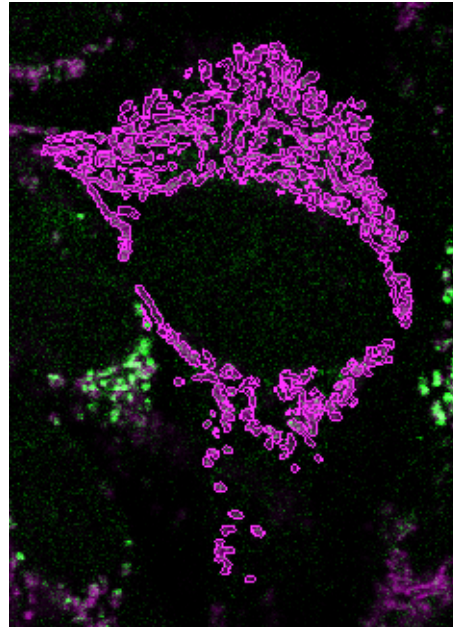

green top-hat

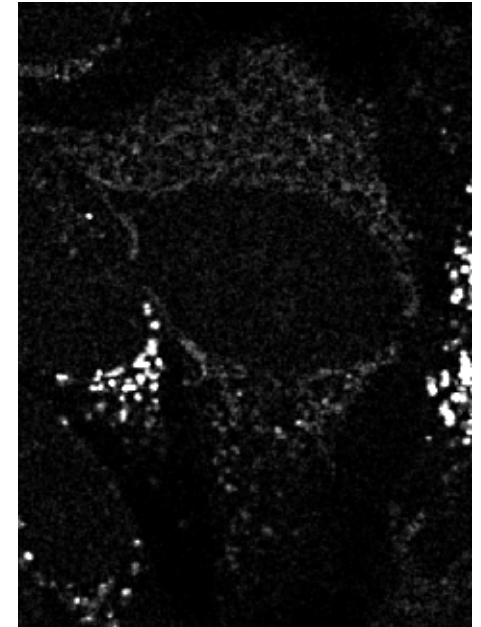

puncta: 노랑 = 미토 위, 청록 = 밖

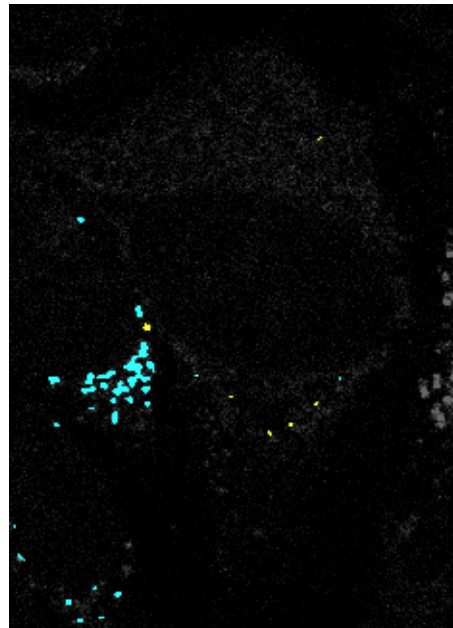

5단계 — 출력과 통계

상관/회귀분석

- 모든 (미토콘드리아 지표 × green 지표) 쌍에 대해 최소제곱 회귀선, Pearson r , R^2 , p , Spearman ρ 를 세포 단위·조각 단위로 계산
- 전체 / green+ 만 / green- 만 각각 따로
- 산점도는 X·Y 평균(또는 중앙값)에서 사분면으로 나눠 각 사분면 비율을 표시 → 음의 상관(II·IV 사분면)도 바로 보입니다
- 점이 3개 미만이거나 값이 모두 같으면 nan 대신 이유를 표시

여러 샘플 통합 분석 (Analysis 탭)

- 결과 폴더를 지정하면 하위 폴더의 _per_cell.csv / _per_mito.csv를 모두 모아 dataset: preset: sample 열을 붙여 함께 분석
- green+/-, dataset, sample로 거르고 색 구분, 회귀표 내보내기

샘플마다 출력

- _results.xlsx (green_pos / green_neg / all 시트, settings)
- _per_cell / _per_mito / _green_puncta / _correlations CSV (각각 _green_pos, _green_neg 버전 포함)
- Fiji용 ROI zip (세포, 미토콘드리아, puncta), 오버레이 이미지

참고: 조각 단위 점들은 같은 세포 안에서 서로 독립이 아니므로 p 값은 세포 단위 결과와 함께 해석하는 것이 안전합니다.

